


Coliforms Chromo-Agar

Pro současnou selektivní detekci *E. coli* a ostatních koliformních bakterií ve vzorcích vody a potravin

Technické parametry

pH:	6,8 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g peptonu; 1 g pyruvátu sodného; 1 g sorbitolu; 1 g tryptofánu; 5 g chloridu sodného; 4,9 g fosfátového pufru; 0,36 g chromogenní směsi; 0,1 g heptadecyl sulphatu sodného; 10 g agaru
Aplikace:	26,4 g na 1 l agaru

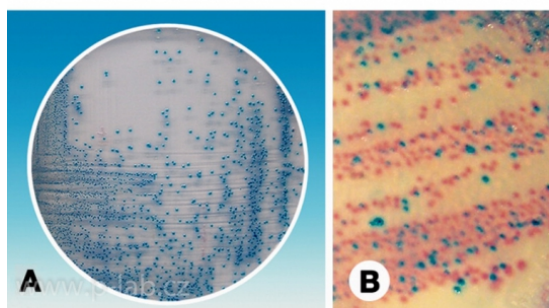

Barvení:

A: *E. coli* (modrá), B: ostatní koliformní bakterie (růžová)

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 g	plast	R.CL45.2
pro mikrobiologii	525 g	plast	R.CL45.1

Reakcí s β-D-Glukuronidasou se kolonie *E. coli* barví modře, kolonie ostatních koliformních bakterií losově (reakcí s β-D-galaktosidasou)