

DNA markery pro krátký běh elektroforézy


Markery pro DNA elektroforézu

PCR marker DNAScore

DNA marker

- Obsahuje 7 fragmentů o velikosti 500-1500 bp
- cca 200 pruhů/100 µg (minigel)
- Fragmenty o velikosti 500 bp, 1000 bp a 1500 bp jsou zvýrazněny pro snadnější analýzu
- Fragment o velikosti 1000 bp je vhodný pro DNA kvantifikaci
- Marker se v gelu dělí velmi rychle a je proto vynikající pro analýzu fragmentů PCR a rutinní analýzy
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.T917.1

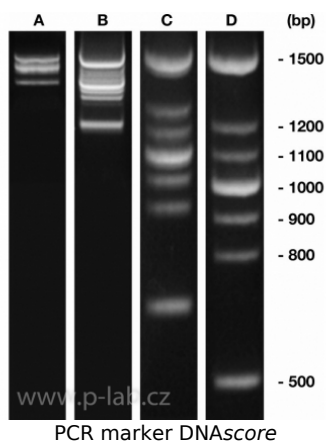


DNA marker short-run 1

DNA marker pro krátký běh

- Obsahuje 5 fragmentů o velikosti 500-2500 bp
- cca 400 pruhů/100 µg (minigel)
- DNA marker pro velmi krátké vzdálenosti
- Nejlepších výsledků je dosaženo při běžné vzdálenosti 18 mm v 1,5% agarózovém gelu
- Fragment o velikosti 1500 bp je zvýrazněn pro snadnější analýzu
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.0146.1

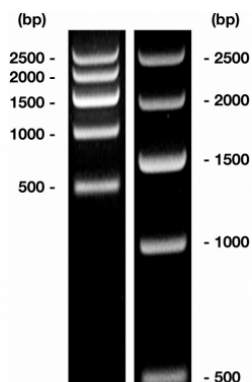


DNA marker short-run 1

DNA marker short-run *rozšířený*

DNA marker pro krátký běh

- Obsahuje 9 fragmentů o velikosti 100-6000 bp
- cca 300 pruhů/100 µg (minigel)
- Optimalizovaný pro všechny standardní aplikace
- Vzhledem k menšímu počtu pásem se marker efektivně odděluje i na velmi krátkých vzdálenostech
- Nejlepších výsledků je dosaženo při vzdálenosti 15 mm / 7 min běhu elektorforézy v 1,5% agarózovém gelu s koncentrací 0,3 µg DNA na dráhu
- Fragment o velikosti 1500 bp je zvýrazněn pro snadnější analýzu
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Popis	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.CL05.1

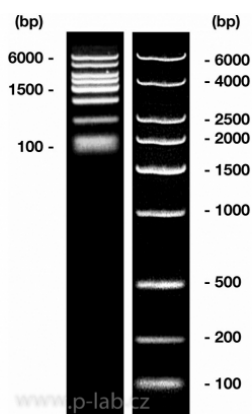

DNA marker short-run *rozšířený*